



KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

**Kit di Verifica
per Ecstasy /
Sali da Bagno**
SW-4000




**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del Test

1

Rimuovere il Tappo SWIPPER™ dall'unità di test.

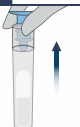

Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2


Campionare la sostanza sospetta con il Tappo SWIPPER™.



Preparazione del Test

3

Rimettere il Tappo SWIPPER™ alla provetta. Premere con decisione.

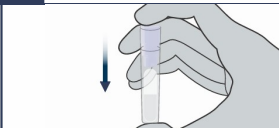

STOP


**Non continuare a meno
che il Tappo SWIPPER™
non sia adeguatamente
fissato.**

**Attenzione:
Il kit contiene un acido.
Assicurarsi di seguire tutte
le procedure di sicurezza.**

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando la fiala non si rompe.

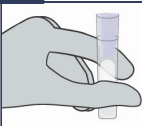

5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.

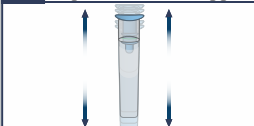

Risultati



La comparsa di un colore violetto indica fortemente la presenza di **Ecstasy / MDMA, MDA, MDE, MBDB** o suoi analoghi.

**Il colore può impiegare fino a 3 minuti per svilupparsi.*



La comparsa di un colore giallo indica la presenza di Sali da Bagno quali **MDPV, Metilone o Butilone**.



Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le droghe sopra elencate non sono presenti.



Smaltimento

Smaltire nei rifiuti non pericolosi oppure diluire il reagente con dell'acqua.



ML
07-19



Leader mondiale nei
prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele

LOT: SW4013125A

SCAD: 09/2028