

# SWIPPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

## Kit di Verifica per Fentanyl

SW-0690



**Leggere  
prima  
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione  
del Test

**1**

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.



**Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.**

**2**

Campionare la sostanza sospetta con il tappo dello SWIPPER™ (Frantumare le compresse).

**Preleva campione**

**Prova  
più  
punti**



Preparazione  
del Test

**3**

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.



**S  
T  
O  
P**

**Non continuare a meno che il tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.**

**⚠ Attenzione: ⚠**

**Il kit contiene un acido. Assicurarsi di seguire tutte le procedure di sicurezza.**

Identificazione


**4**

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.



**5**

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.

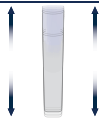

Risultati



La comparsa di un colore tendente al giallo scuro - marrone indica la presenza di Fentanyl.



La comparsa di un colore viola scuro entro un minuto indica la presenza di un oppiaceo quale Eroina, Morfina o Codeina.  
\*Ciò non esclude la possibilità che sia presente Fentanyl.



La comparsa di un colore rossiccio-arancio entro un minuto indica la presenza di Anfetamina o Metanfetamina.  
\*Ciò non esclude la possibilità che sia presente Fentanyl.



Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le sostanze sopra menzionate non sono presenti nel campione testato

**Smaltimento**

Smaltire nei rifiuti non pericolosi oppure diluire il reagente con dell'acqua.



01/24

**IDenta**  
Soluzioni di rilevazione


Prodotto da IDenta Ltd  
www.identa-corp.com

Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele

LOT: SW06913125A

SCAD: 09/2028


# TEST CON ESITO POSITIVO

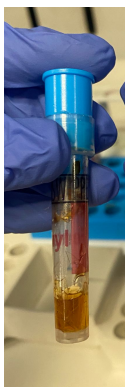

**Presenza di  
FENTANYL**



**Presenza di  
EROINA**

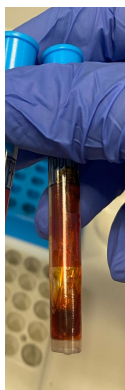

**Presenza di  
METANFETAMINA**