

SWIPPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
PRECURSORI DI DROGHE

Kit di Verifica
per GBL

SW-0280T



**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del del Test

1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Tirare con decisione



Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2

Inserire il tappo dello SWIPPER™ nel liquido.


Immergere



Preparazione del del Test

3

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.

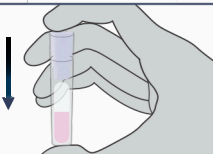


STOP

Non continuare a meno che il tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.

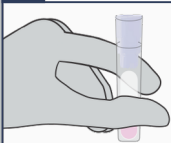

5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.

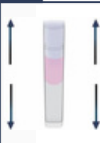

Inclinare il tubo lateralmente per verificare se la carta assorbente sul tappo ha cambiato colore


Risultati



La comparsa di particelle di colore turchese sulla superficie della carta presente sul tappo indica la presenza di GBL (gamma-Butirrolattone).



Se non si sviluppa alcuna particella di colore turchese, il GBL non è presente.

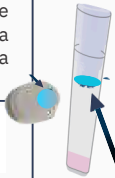

Smaltimento

Smaltire nei rifiuti non pericolosi oppure diluire il reagente con dell'acqua.



ITL v5
01-24



Leader mondiale nei
prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com

Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele

LOT: SW02813125AT

SCAD: 09/2028