

SWIPPER™

TESTING KITS FOR DRUGS

Kit di
identificazione per
Cocaina e Crack

SW-1000




Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del test

1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.

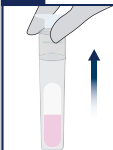

Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2


campionare la sostanza sospetta (liquida, in polvere, pasticche) con il tappo dello SWIPPER™



Preparazione del test

3

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.

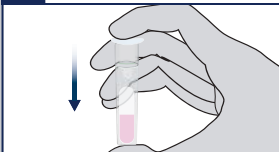


Non continuare a meno che il Tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, comprimere la fiala fino a quando l'ampolla all'interno non si rompe.

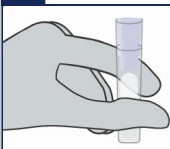

5

Agitare vigorosamente la fiala su e giù per assicurarsi che il reagente venga a contatto con il tappo

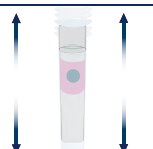


Risultati



Agitare energicamente la fiala in modo che anche la droga (cocaina/cristalli di crack) eventualmente rimasta sul tappo entri in contatto con il reagente. La comparsa di particelle di colore turchese sulla parte campionatrice del tappo, sulle pareti della provetta e/o nel liquido, indica la presenza di **Cocaina o Crack**



Se non si sviluppa alcuna particella di colore turchese, ne la Cocaina ne il Crack sono presenti.

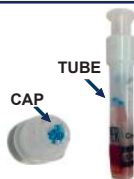

Smaltimento

Smaltire nei rifiuti non pericolosi oppure diluire il reagente con dell'acqua.



01-19

IDenta
World Leader in
Forensic Products

Manufactured by IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Patented Technology
Made in Israel

LOT: SW1013125A

SCAD: 09/2028